



Stručný návod k obsluze

- ① **Tlačítko počtu otáček:** spuštění motoru / zvýšení otáček.
- ② **Tlačítko chladiva:** Pro tlačítko chladiva lze nastavit 2 režimy provozu. Podle nastaveného režimu provozu má tlačítko chladiva následující funkce:
Krátce stiskněte – množství dopravovaného chladiva zapnout/vypnout *nebo* krátce stiskněte – nastavte množství dopravovaného chladiva od 0 ml/s do 110 ml/s (4 stupně).
Dlouze stiskněte – aktivace funkce ručního proplachování.
- ③ **Tlačítko programu:** Krátce stiskněte – krok v programu vpřed.
Dlouze stiskněte – krok v programu zpět.
- ④ **Tlačítko směru otáčení motoru:** Nastavení směru otáčení motoru.

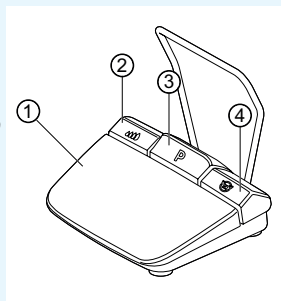

Připojení sady hadic

1. Zavřete hadicovou svorku ⑦.
2. Hadici chladicího prostředku ① upevněte na násadci nebo ohebném kolenu.
3. Spony ② upevněte do těsné blízkosti k vedení motoru.
4. Adaptér hadice ③ zaklapněte.
5. Hadici vložte do čerpadla (vzdálenost cca 1 cm mezi konektorem a vstupem čerpadla ④ a čerpadlo zajistěte).
6. Vpichovací jehlu ⑥ zapíchněte.
7. Hadicovou svorku ⑦ otevřete.

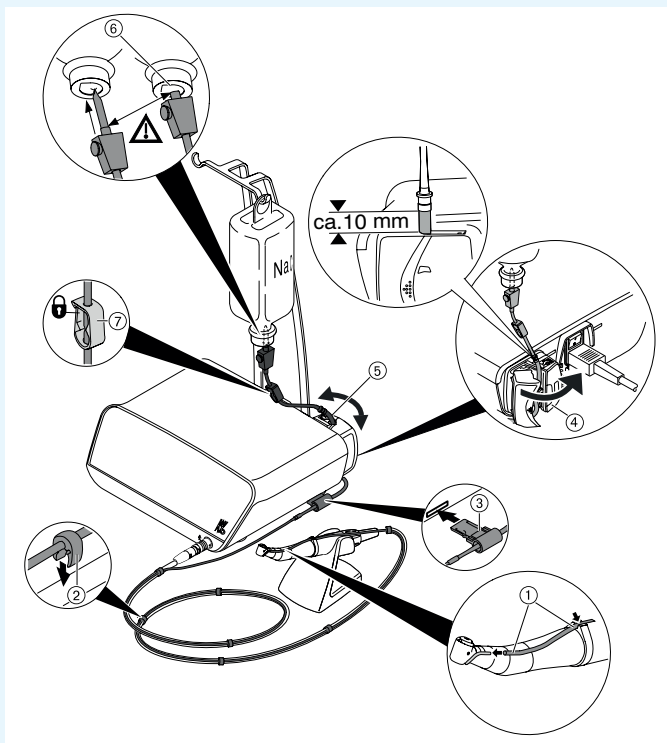

Upozornění


Jen u skleněných lahví otevřete zavzdušnění u vpichovací jehly ⑥.



POZOR

Tento stručný návod k obsluze obsahuje výhradně základní ovládací funkce. Před prvním uvedením do provozu a také při obsluze osobami, které nejsou podrobně seznámeny se zacházením s tímto lékařským výrobkem, je bezpodmínečně nutné respektovat návod k použití, který je součástí dodávky.



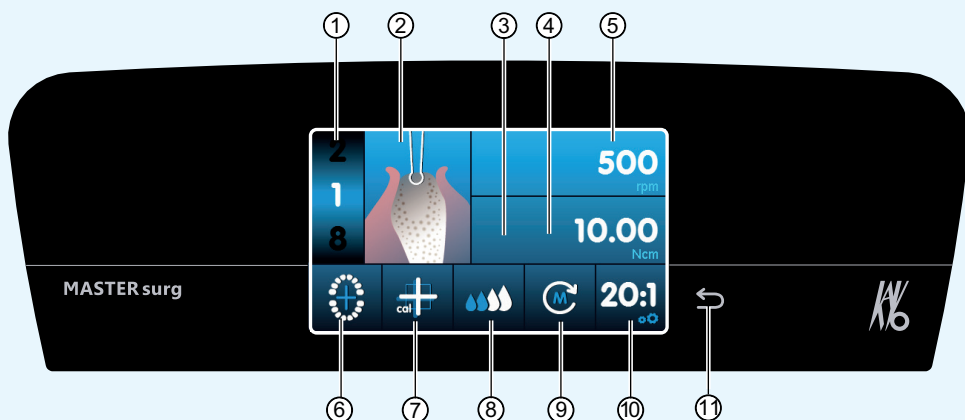

- | | |
|---|---|
| ① Krok programu (1 až max. 10) | ⑦ Aktivace kalibrace jedním dotekem |
| ② Zobrazení činnosti | ⑧ Nastavení dopravovaného množství chladiva |
| ③ Maximálně se vyskytující točivý moment
(nezobrazuje se u všech činností) | ⑨ Směr otáčení motoru |
| ④ Omezení točivého momentu | ⑩ Převod |
| ⑤ Otáčky | ⑪ Tlačítko Zpět |
| ⑥ Zobrazení stavu nožního spouštěče / zadání
polohy implantátu | |

Změna parametrů a aktivity

Výběr nastavení přístroje

Krátce stiskněte tlačítko zpět ⑪, tím se vrátíte do chirurgického programu nebo do výběru programů.

Dlouze stiskněte k vyvolání nastavení přístroje.

Výběr resp. změna parametrů nebo činnosti

Funkce ④ a ⑤: lze změnit posunutím regulátoru doprava nebo doleva, nebo klepnutím na symboly +/-.

Funkce ①, ⑧, ⑨ a ⑩: lze změnit přímo klepnutím.

Funkce ②, ⑥ a ⑦: lze změnit pomocí zobrazeného dialogového okna.

Uložení se provede automaticky při opuštění parametru nebo činnosti.

Omezení počtu kroků programu

Klepněte na krok programu po poslední vybrané činnosti a zvolte symbol vlajky.

Odstranění omezení kroků programu

Zvolte krok programu se symbolem vlajky a přiřadte novou činnost.

Indikace točivého momentu a dokumentace

Jedině se zapnutou funkcí dokumentace se zobrazí točivý moment v činnosti „Vsazování implantátu“ jako obrázek a uloží se na SD kartě.

