



Lyhyt käyttöohje

- ① **Kierroslukupainike:** Käynnistä moottori / nosta kierroslukua.
- ② **Jäähdytysainepainike:** Jäähdytysainepainiketta varten voidaan asettaa 2 eri käyttötapaa. Asetetusta käytettävästä riippuen jäähdytysainepainikkeella on seuraavat toiminnot:
 Paina painiketta lyhyesti - jäähdytysaineen syöttömäärän kytkeminen päälle/pois päältä *tai*
 paina painiketta lyhyesti - jäähdytysaineen syöttömäärän säätö välille 0 ... 110 ml/s (4 vaihetta).
 Paina painiketta kauan - manuaalisen huuhtelutoiminnon aktivointi.
- ③ **Ohjelmointipainike:** Paina painiketta lyhyesti - ohjelmavaihe siirtyy eteenpäin. Paina painiketta kauan - ohjelmavaihe siirtyy taaksepäin.
- ④ **Moottorin pyörimissuunnan painike:** Valitsee moottorin pyörimissuunnan.

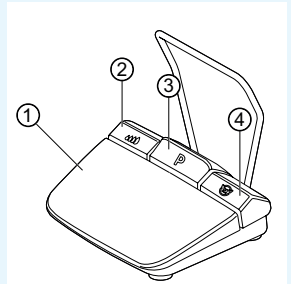

Letkusetin liitännät

1. Sulje letkunkiristin ⑦.
2. Kiinnitä jäähdytysaineletku ① käsi- tai kulmakappaleeseen.
3. Kiinnitä kiinnittimet ② tiukasti moottorin johtoon.
4. Napsauta letkuadapteri ③ kiinni.
5. Aseta letku pumppuun (n. 1 cm väli liittimen ja pumpun sisääntulon ④ välillä ja lukitse pumppu).
6. Työnnä pistoneula ⑥ sisään.
7. Avaa letkunkiristin ⑦.

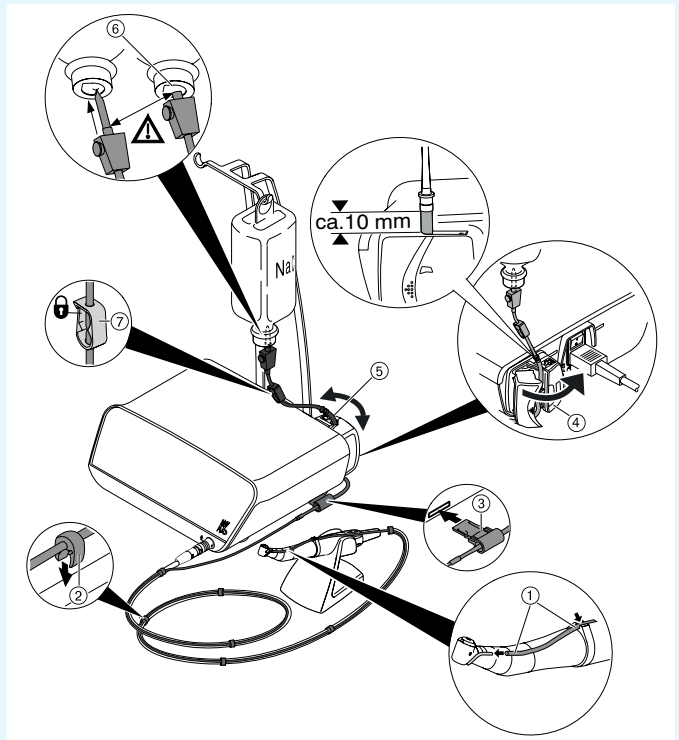

Huomautus


Avaa pistoneulan ⑥ tuuletusventtiili vain lasipulloja käytettäessä.



VARO

Näissä käyttöohjeissa on esitetty vain oleelliset käyttötoiminnot. Ennen ensimmäistä käyttöönottoa sekä jos laitetta käyttävät henkilöt, jotka eivät ole tottuneet tämän lääkinällisen laitteen käyttöön, noudata ehdottomasti toimitukseen kuuluvan käyttöohjeen ohjeita.



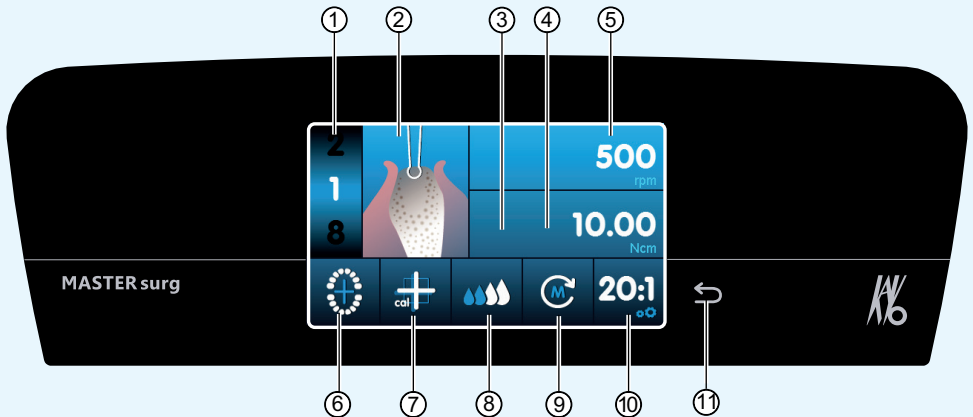

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ① Ohjelmavaihe (1 - 10) | ⑦ One-Touch-kalibroinnin aktivointi |
| ② Toiminnon kuvaus | ⑧ Jäähdytysaineen syöttömäärän asetus |
| ③ Maksimivääntömomentti
(ei näytetä kaikissa toiminnoissa) | ⑨ Moottorin pyörimissuunta |
| ④ Vääntömomenttirajoitus | ⑩ Välitys |
| ⑤ Kierrosluku | ⑪ Takaisin-painike |
| ⑥ Langattoman jalkakäynnistimen tilanäyttö /
implantantin asennon syöttö | |

Parametrin ja toiminnon muuttaminen

Laiteasetuksen valinta

Siirry kirurgiaohjelmaan tai ohjelmanvalintaan painamalla takaisin-painiketta ⑪ lyhyesti.

Hae laiteasetukset painamalla pitkään.

Parametrin tai toiminnon valinta tai muuttaminen

Toiminnot ④ ja ⑤: voidaan muuttaa liikuttamalla säädintä oikealle tai vasemmalle tai napsauttamalla merkkejä +/-.

Toiminnot ①, ③, ⑨ ja ⑩: voidaan muuttaa suoraan napsauttamalla.

Toiminnot ②, ⑥ ja ⑦: voidaan muuttaa näytölle ilmaantuvassa valintaikkunassa.

Tallennus tapahtuu automaattisesti parametrissa tai toiminnosta poistuesasi.

Ohjelmavaiheiden määrän rajoittaminen

Napsauta ohjelmavaihetta viimeksi valitun toiminnon jälkeen ja valitse lippusymboli.

Ohjelmavaiheiden rajoituksen poistaminen

Valitse ohjelmavaihe lippusymbolilla ja määritä uusi toiminto.

Vääntömomenttinäyttö ja dokumentaatio

Vain, jos dokumentaatiotoiminto on päällä, vääntömomentti näytetään graafisesti toiminnossa „Implantantin asennus” ja tallennetaan SD-kortille.

