



Krótka instrukcja obsługi

- ① **Przycisk prędkości obrotowej:** uruchomienie silnika / zwiększenie prędkości obrotowej.
- ② Przycisk środka chłodzącego: możliwe jest ustawienie 2 trybów pracy przycisku środka chłodzącego. W zależności od ustawionego trybu pracy przycisku środka chłodzącego ma następujące funkcje:
Krótkie naciśnięcie – włączenie/wyłączenie przepływu środka chłodzącego lub krótkie naciśnięcie – ustawienie natężenia przepływu środka chłodzącego od 0 do 110 ml/s (4 poziomy).
- Długie naciśnięcie – aktywacja funkcji przepłukiwania.
- ③ **Przycisk programu:** krótkie naciśnięcie – jeden etap programu do przodu. Długie naciśnięcie – jeden etap programu wstecz.
- ④ **Przycisk kierunku obrotów silnika:** ustawienie kierunku obrotów silnika.

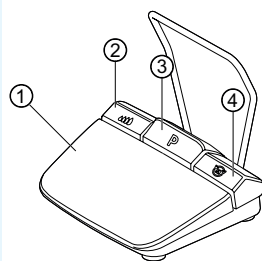

Podłączanie zestawu węży

1. Zamknąć zacisk węży ⑦.
2. Zamocować wąż środka chłodzącego ① na prostownicy lub kątnicy.
3. Zamocować klipsy ② ściśle do przewodu silnika.
4. Zablokować adapter węży ③.
5. Włożyć wąż do pompy (zachować odstęp ok. 1 cm między łącznikiem a wejściem pompy ④ i pompą).
6. Wbić igłę do nakłuwania ⑥.
7. Otworzyć zacisk węży ⑦.

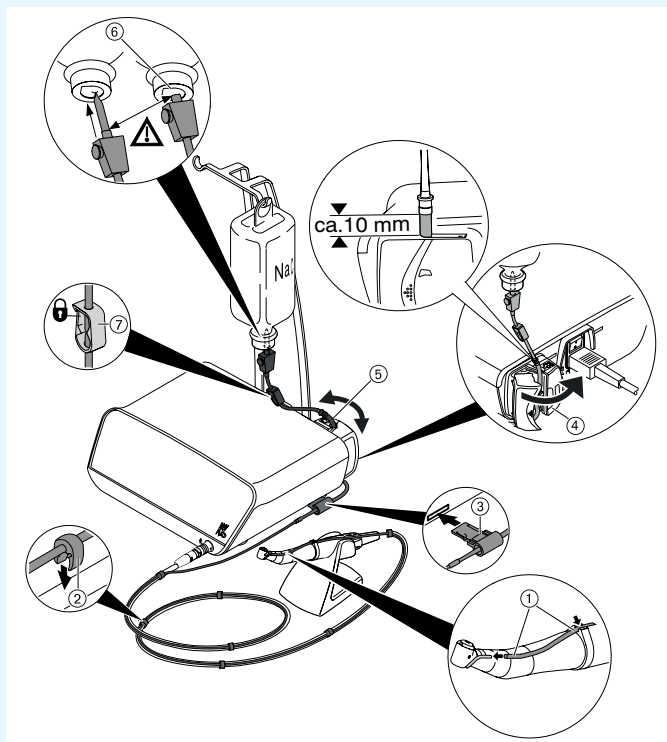

Wskazówki


Tylko w przypadku szklanej butelki otworzyć otwór napowietrzający przy igle do nakłuwania ⑥.



OSTROŻNIE

Skrócona instrukcja obsługi zawiera wyłącznie najważniejsze funkcje obsługi. Przed pierwszym uruchomieniem oraz podczas obsługi przez osoby, które nie są zaznajomione ze sposobem posługiwania się tym wyrobem medycznym, należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek dołączonej instrukcji użycia.



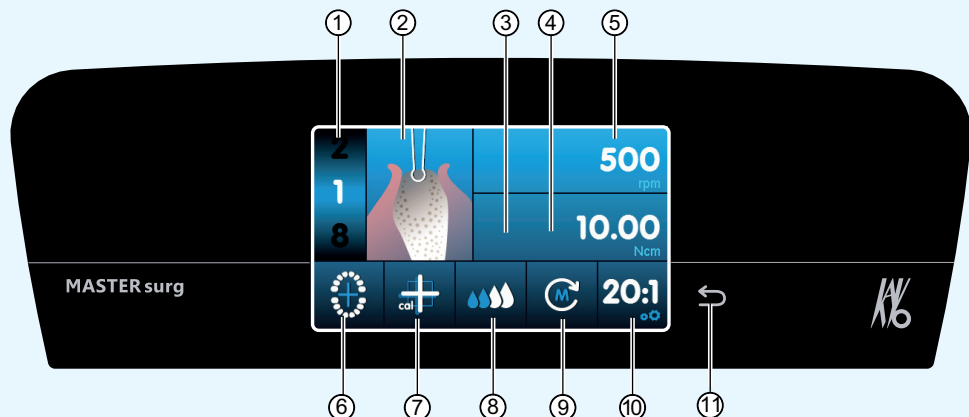

- | | |
|--|---|
| ① Etap programu (1 do maks. 10) | ⑦ Aktywacja kalibracji „One Touch” |
| ② Przedstawienie czynności | ⑧ Ustawienie ilości tłoczonego środka chłodzącego |
| ③ Maksymalny moment obrotowy (nie jest przedstawiany przy wszystkich czynnościach) | ⑨ Kierunek obrotu silnika |
| ④ Ograniczenie momentu obrotowego | ⑩ Przełożenie |
| ⑤ Prędkość obrotowa | ⑪ Przycisk „Wstecz” |
| ⑥ Wskaźnik stanu zdalnego sterownika nożnego/ wprowadzanie pozycji implantu | |

Zmiana parametrów i czynności

Wybór ustawień urządzenia

Krótko naciśnięcie przycisku „Wstecz” ⑪, aby przejść do programu chirurgicznego lub do wyboru programów.

Długie naciśnięcie powoduje wywołanie ustawień podstawowych urządzenia.

Wybór i zmiana parametrów lub czynności

Funkcje ④ i ⑤: zmiana następuje poprzez przesunięcie regulatora w prawo lub w lewo bądź przez naciśnięcie symboli +/-.

Funkcje ①, ⑧, ⑨ i ⑩: zmiana następuje przez bezpośrednie naciśnięcie.

Funkcje ②, ⑥ i ⑦: zmiana następuje w wyświetlanym oknie dialogowym.

Zapis następuje automatycznie z chwilą opuszczenia ekranu parametru lub czynności.

Ograniczenie liczby etapów programu

Naciśnięcie etapu programu zgodnie z ostatnio wybraną czynnością i wybrać symbol flagi.

Anulowanie ograniczenia liczby etapów programu

Wybrać etap programu z symbolem flagi i przypisać mu nową czynność.

Wskazanie momentu obrotowego i dokumentacja

Moment obrotowy dla czynności „Wszczepianie implantu” jest prezentowany na wykresie i zapisywany na karcie SD tylko wówczas, gdy włączona jest funkcja dokumentacji.

